

Art. N°	Description	Taille	Conditionnement		
			Intérieur	Extérieur	
<b>Unités de prélèvement sanguin / perfusion de SÉCURITÉ (stérile)</b>					
450090	Unités de prélèvement sanguin / perfusion de SÉCURITÉ	Longueur de tubulure : 19cm	25G x 3/4"	50 pcs.	1.000 pcs.
450091	Unités de prélèvement sanguin / perfusion de SÉCURITÉ	Longueur de tubulure : 19cm	21G x 3/4"	50 pcs.	1.000 pcs.
450092	Unités de prélèvement sanguin / perfusion de SÉCURITÉ	Longueur de tubulure : 19cm	23G x 3/4"	50 pcs.	1.000 pcs.
<b>Unités de prélèvement sanguin de SÉCURITÉ + adaptateur luer (stérile)</b>					
450083	Unités de prélèvement sanguin de SÉCURITÉ + adaptateur luer	Longueur de tubulure : 10cm	21G x 3/4"	50 pcs.	1.000 pcs.
450081	Unités de prélèvement sanguin de SÉCURITÉ + adaptateur luer	Longueur de tubulure : 19cm	21G x 3/4"	50 pcs.	1.000 pcs.
450095	Unités de prélèvement sanguin de SÉCURITÉ + adaptateur luer	Longueur de tubulure : 30cm	21G x 3/4"	50 pcs.	1.000 pcs.
450084	Unités de prélèvement sanguin de SÉCURITÉ + adaptateur luer	Longueur de tubulure : 10cm	23G x 3/4"	50 pcs.	1.000 pcs.
450082	Unités de prélèvement sanguin de SÉCURITÉ + adaptateur luer	Longueur de tubulure : 19cm	23G x 3/4"	50 pcs.	1.000 pcs.
450096	Unités de prélèvement sanguin de SÉCURITÉ + adaptateur luer	Longueur de tubulure : 30cm	23G x 3/4"	50 pcs.	1.000 pcs.
450099	Unités de prélèvement sanguin de SÉCURITÉ + adaptateur luer	Longueur de tubulure : 30cm	25G x 3/4"	50 pcs.	1.000 pcs.
<b>Unités de prélèvement sanguin de SÉCURITÉ + corps de pompe (stérile)</b>					
450087	Unités de prélèvement sanguin de SÉCURITÉ + corps de pompe	Longueur de tubulure : 10cm	21G x 3/4"	24 pcs.	240 pcs.
450085	Unités de prélèvement sanguin de SÉCURITÉ + corps de pompe	Longueur de tubulure : 19cm	21G x 3/4"	24 pcs.	240 pcs.
450086	Unités de prélèvement sanguin de SÉCURITÉ + corps de pompe	Longueur de tubulure : 19cm	23G x 3/4"	24 pcs.	240 pcs.
450080	Unités de prélèvement sanguin de SÉCURITÉ + corps de pompe	Longueur de tubulure : 30cm	25G x 3/4"	24 pcs.	240 pcs.
<b>Unités de prélèvement sanguin de SÉCURITÉ + corps de pompe pour hémoculture (stérile)</b>					
450182	Unités de prélèvement sanguin de SÉCURITÉ + corps de pompe pour hémoculture	Longueur de tubulure : 19cm	21G x 3/4"	24 pcs.	240 pcs.
450183	Unités de prélèvement sanguin de SÉCURITÉ + corps de pompe pour hémoculture	Longueur de tubulure : 19cm	23G x 3/4"	24 pcs.	240 pcs.
450184	Unités de prélèvement sanguin de SÉCURITÉ + corps de pompe pour hémoculture	Longueur de tubulure : 30cm	21G x 3/4"	24 pcs.	240 pcs.
450185	Unités de prélèvement sanguin de SÉCURITÉ + corps de pompe pour hémoculture	Longueur de tubulure : 30cm	23G x 3/4"	24 pcs.	240 pcs.

Ces produits ne contiennent aucun composant en latex naturel.



Pour plus d'informations, nous vous invitons à visiter notre site [www.gbo.com/preanalytics](http://www.gbo.com/preanalytics) ou nous contacter :

**Autriche (siège)**

Greiner Bio-One GmbH  
Tél. +43 7583 6791-0  
Fax +43 7583 6318  
E-Mail [office@at.gbo.com](mailto:office@at.gbo.com)

**Espagne**

VACUETTE Espana S.A.  
Tél. +34 91 652 77 07  
Fax +34 91 652 33 35  
E-Mail [info@vacuette.es](mailto:info@vacuette.es)

**Inde**

Greiner Bio-One INDIA Pvt., Ltd.  
Tél. +91 120 456 8787  
Fax +91 120 456 8788  
E-Mail [info@gboindia.com](mailto:info@gboindia.com)

**Suisse**

Greiner Bio-One VACUETTE Schweiz GmbH  
Tél. +41 71 228 55 22  
Fax +41 71 228 55 21  
E-Mail [office@ch.gbo.com](mailto:office@ch.gbo.com)

**Allemagne**

Greiner Bio-One GmbH/Preanalytics  
Tel +49 7022 948-0  
Fax +49 7022 948-514  
E-Mail [office@de.gbo.com](mailto:office@de.gbo.com)

**Etats-Unis**

Greiner Bio-One North America Inc.  
Tél. +1 704 261-7800  
Fax +1 704 261-7899  
E-Mail [info@us.gbo.com](mailto:info@us.gbo.com)

**Pays-Bas**

Greiner Bio-One B.V.  
Tél. +31 172 4209 00  
Fax +31 172 4438 01  
E-Mail [info@nl.gbo.com](mailto:info@nl.gbo.com)

**Thaïlande**

Greiner Bio-One Thailand Ltd  
Tél. +66 38 46 56 33  
Fax +66 38 46 56 36  
E-Mail [office@th.gbo.com](mailto:office@th.gbo.com)

**Brésil**

Greiner Bio-One Brasil  
Tél. +55 19 3468-9600  
Fax +55 19 3468-9621  
E-Mail [office@br.gbo.com](mailto:office@br.gbo.com)

**France**

Greiner Bio-One SAS  
Tél. +33 1 69 86 25 25  
Fax +33 1 69 86 25 35  
E-Mail [office@fr.gbo.com](mailto:office@fr.gbo.com)

**Royaume-Uni**

Greiner Bio-One Ltd.  
Tél. +44 1453 8252 55  
Fax +44 1453 8262 66  
E-Mail [info@uk.gbo.com](mailto:info@uk.gbo.com)

**Chine**

Greiner Bio-One Suns Co., Ltd.  
Tél. +86 10 83 55 19 91  
Fax +86 10 63 56 69 00  
E-Mail [office@cn.gbo.com](mailto:office@cn.gbo.com)

**Hongrie**

Greiner Bio-One Hungary Kft.  
Tél. +36 96 213 088  
Fax +36 96 213 198  
E-Mail [office@hu.gbo.com](mailto:office@hu.gbo.com)



**VACUETTE®**

**Unités de  
prélèvement  
SÉCURITÉ**

Nos innovations  
pour votre sécurité



## Unités de prélèvement SÉCURITÉ

Spécialement conçu pour le prélèvement sanguin sur des patients à veines difficiles. Ces systèmes vous protègent ainsi que vos collaborateurs des risques d'accident d'exposition au sang.



### Activation

Activation définitive de la sécurité lors du déclenchement du « clic » sonore.

### Mécanisme de sécurité

Déclenchement facile et rapide du mécanisme de sécurité par une légère pression des 2 ergots.

### Fenêtre transparente

Contrôle automatique du flux sanguin grâce à la fenêtre transparente.

### Sécurité irréversible

Grâce à l'activation du mécanisme de sécurité depuis la veine vers la gaine de protection.

### Plus de flexibilité

Une tubulure souple à large diamètre offre souplesse et débit important.


### Combiné

Unité de prélèvement validée également pour les perfusions.

Art. n° 450090-92

## Gamme complète des unités de prélèvement SÉCURITÉ

Pour plus de sécurité, les unités de prélèvement SÉCURITÉ sont disponibles pré-montées :

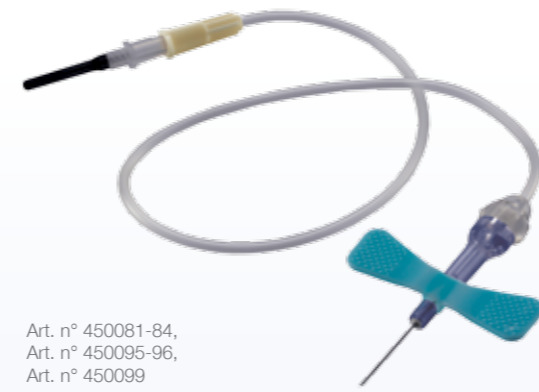

Art. n° 450081-84,  
Art. n° 450095-96,  
Art. n° 450099

### Unités de prélèvement sanguin SÉCURITÉ + adaptateur luer

- Unités pré-monté avec adaptateur luer dans un sachet unitaire stérile.
- Manipulation optimisée.



Art. n° 450085-87,  
Art. n° 450080

### Unités de prélèvement sanguin SÉCURITÉ + corps de pompe

- Solution pré-montée avec corps de pompe dans un sachet unitaire stérile.
- Gain de temps : solution pré-montée.
- Solution pratique et complète pour un gain de sécurité.



Art. n° 450182-85

### Unités de prélèvement SÉCURITÉ + corps de pompe universel

- Solution pré-monté avec corps de pompe universel pour flacon d'hémoculture dans un sachet unitaire stérile.
- Spécialement étudié pour les prélèvements mixtes (Fla cons d'hémoculture + tubes VACUETTE®) en un seul geste.
- Nombre de prélèvement réduit, geste productif et sûr ainsi que gain de temps pour le prélèvement.

## Procédure d'utilisation\*




1 Retirez le capuchon de protection



2 Réalisez la ponction veineuse



3 Introduisez le tube

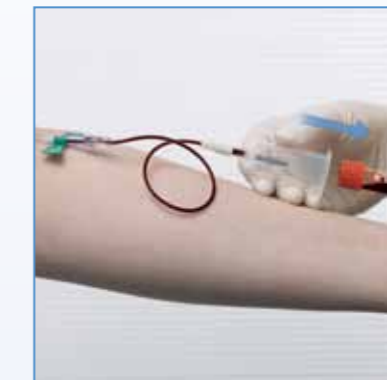

4 Retirez le dernier tube



6 Un clic audible signale que le mécanisme est bien activé



7 Unité de prélèvement sanguin SÉCURITÉ activé



5 Activez le mécanisme de sécurité (en appuyant sur et en tirant vers l'arrière la zone de couleur moins foncée)



8 Éliminez le dispositif

\* Pour des instructions complètes sur l'utilisation, veuillez consulter le Mode d'emploi de chaque produit.